


LED 美顔マスク 取扱説明書

LEDMASK-PN

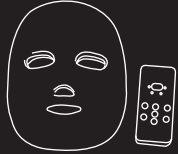


LED 美顔マスク最新7色モデルです。簡単操作でご家庭でお手軽にプロのケアを体験。マスク本体を繰り返し使用できるため、無駄な出費を抑え、かつお好きなタイミングで満足のスキンケアが楽しめます。

本製品の特長

- ・LED 美顔マスクとは光の吸収特性を利用した 低刺激の美容法です
 - ・150 個の LED から放射する光で肌細胞を刺激します
 - ・光の3つの異なる色。それぞれの光は、強度を調整することができます
 - ・就寝前のスキンケア後のご使用がオススメです！お肌の調子を改善し翌日はすっきりツヤ肌で快適な一日をスタート
 - ・特殊 LED ランプを使用した光美容器です。肌状態に合わせて7色選択できます
 - ・強さ調整ができるので、お肌コンディションに合わせて強さも調整可能です
- ※効果の感じ方には個人差がございます。

はじめにご確認ください


- A フェイスマスク…1
 B ネックパーツ…1
 C リモコン…1
 D 固定用つまみ…2
 E 二股ケーブル…1
 (フェイスマスク・ネックパーツとリモコンを繋ぎます。)
 F ケーブル…1
 (リモコンと AC アダプターを繋ぎます。)
 G AC アダプター
 H ネックパーツ用固定ゴム…1

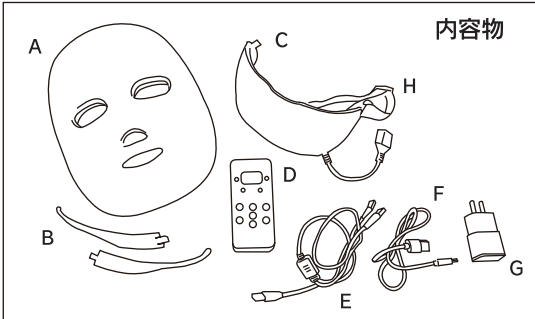

※ご使用になる前に、必ず充電を行ってください。
 充電電池（リモコン内部）の容量が少ないと、コンセントにつないだままでもご使用になれないことがあります。
 (DのリモコンとGのACアダプターをFのコードで繋ぎ充電します。リモコン下部のランプが緑色になれば充電完了です)

ご使用方法

- ①Aのフェイスマスクの両側にBの固定用つまみをそれぞれ差し込みます（左右ございます。ご注意ください）
- ②Eのケーブルの二股部分を片方はAにもう片方はCに繋ぎ、一番長い方をDのリモコンに繋ぎます。
- ③次にFのケーブルをDと繋ぎもう片方をGに繋ぎ、Gをコンセントに差し込みます。
- ④Dのリモコンの主電源ボタンを押し、電源ボタンを押しお好みでご使用ください。
 ※リモコンの使用方法につきましては下記「リモコンについて」をご覧ください。

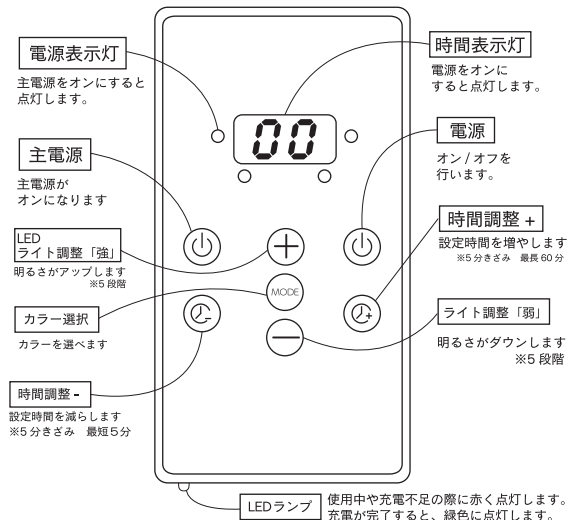


- 約 10 時間でフル充電が完了します。
- フル充電の状態でも連続使用可能時間は 180 分です。

ご注意ください！

左図のリモコン内に充電電池が内蔵されています。充電電池の容量が少なくなると、コンセントに繋いだままでもすぐ切れてしまったりすることがあります。その場合は、LED ランプが緑に点灯するまで充電をしてからお使いください。

色の持つ効果について

- 赤** 気になるシミやシワにアプローチ
- 青** 炎症やニキビなど、肌トラブルのケアに
- 緑** 脂性やお肌のくすみ、キメが悪い時のケアに
- 紫** 赤色と青色を組み合わせたもので、両方の悩みにアプローチ
- 黄** 様々な肌トラブルをまとめてケア。トータルのバランスを整えます
- 水** 緑色と青色を組み合わせたもので、両方の悩みにアプローチ
- 白** お肌の代謝が気になる時に。シミやシワにもアプローチ

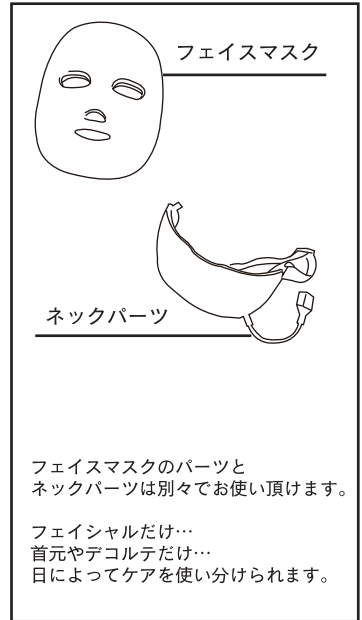

タイマー設定時間は最短5分～最長60分までをお選びいただけます。また、光の強さも5段階からお選びいただけます。その日のお肌の調子や体調に合わせて、お好みの設定でご利用くださいませ。

お手入れ方法

※本製品は電子機器です。水に濡らしたり、丸洗い等は絶対におやめください。
 ※お手入れの前に必ず電源を切ってください。
 ※シンナー・ベンジンなど揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたたりしないでください。

- マスクの汚れが気になってきた場合は、固く絞った布で表面の汚れをやさしくふき取ってください。
- それでも汚れが落ちない場合は、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し固く絞ってふき取ってください。

安全上のご注意

医療電子機器との併用は絶対にしないでください。誤作動を招く恐れがあります。

- ・ペースメーカーなどの生命維持用医療電子機器
- ・人工心臓などの生命維持用医療電子機器
- ・心電計などの装着型医療電子機器

次のような方は絶対に使用しないでください。事故、トラブルの恐れがあります。

- ・心臓に疾患がある方
- ・交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある方
- ・急性疾患 / 有熱性疾患 / 感染症疾患 / 結核症疾患の方
- ・悪性腫瘍のある方
- ・顔面神経痛の方
- ・ケロイド体質の方・他皮膚に異常のある方
- ・その他体調のすぐれない方