

LED美顔マスク 取扱説明書



LEDMASK-PN

この度は、当製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前には、本取扱説明書をよくお読みになりご使用いただきますようお願い申し上げます。


本製品は、光線力学療法の原理を使用して、深層細胞の活性化に働きかけます。
光が皮膚に吸収されると、細胞内のカタラーゼ及びSODの活性を促進し、皮膚に光化学的反応酵素を生成させます。
また、BFGFおよびEGFの分泌を刺激や、メラニンの形成を遮断・排除、細胞増殖の加速を促し
血液循環を促進することで、コラーゲンの生成や皮膚の弾力性を高め、アンチエイジングに効果があります。

本製品の特長

- LED美顔マスクとは光の吸収特性を利用した低刺激の美容法です。
- 150個以上のLEDから放射する光で、肌細胞を刺激します。
- 3つの異なる光色がベースとなり、それぞれの光は強度を調整することができます。
- 特殊なLEDランプを使用した光美顔器です。肌の状態に合わせて7色選択できます。
- 光の強さの調整ができるので、お肌のコンディションに合わせて調整可能です。
- 簡単操作でお手軽に、ご家庭でプロのケアを体験することができます。
- マスク本体を繰り返し使用できるため、無駄な出費を抑えて満足のスキンケアが楽しめます。

はじめにご確認ください

- ① LEDマスク本体 × 1
※コード付属
 - ② ネック用パーツ × 1
※コード付属
 - ③ コントローラー × 1
 - ④ ACアダプター × 1
- 本取扱説明書 × 1
英語表記取扱説明書 × 1

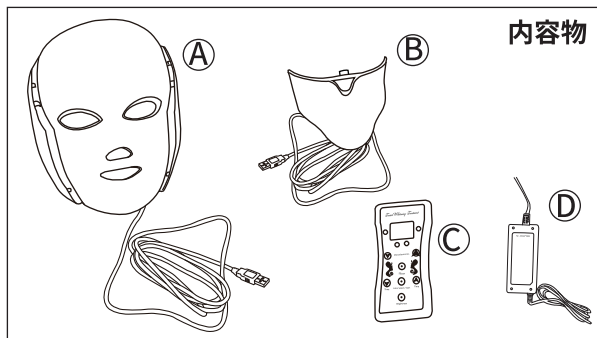

内容物

■ 接続方法


- 1: ①のマスク本体と②のネック用パーツのコードを、③のコントローラーに繋ぎます。
- 2: ③のコントローラーと④のACアダプターを繋ぎ、コンセントに差し込みます。
- 3: ③のコントローラーを操作してご使用ください。

コントローラーは充電式ではありません。
必ずコンセントに繋いでからお使いください。

■ 機能説明

- 7色の光（赤・緑・青・黄・紫・水・白）を1色ずつ選べます。
※各色の効能につきましては「色の効能」の項目をご覧ください。
- 7色の光を自動的にリピートすることができます。
- 7色の光の強さを調節することができます。
- マイクロカレントの強さを調節することができます。
※マイクロカレントとは生体電流に近い中周波の微弱電流です。
新陳代謝を促進したり、コラーゲンの生成を助けることで、顔のたるみの改善や肌の張りが生まれるなどの効果が得られます（効果には個人差があります）
- フリッカー（点滅）モードで、各色の効果の促進を促します。
※フリッカーモードをお使いの際、眩しく感じる場合がございます。
なるべく目を閉じた状態でお使いください。
- フリッカー（点滅）の早さの調節ができます。
- 1分～60分の間でタイマー設定ができます。

マスク裏面の銀色のパーツには
マイクロカレントが流れています。

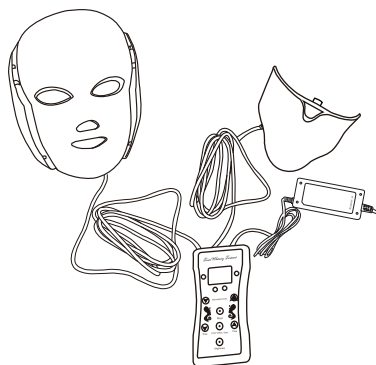

マスク・ネックパーツ・アダプターの3つを
コントローラーに接続して使用します。

安全上のご注意

医療電子機器との併用は絶対にしないでください。
誤作動を招く恐れがあります。


- ペースメーカーなどの生命維持用医療電子機器
- 人工心肺などの生命維持用医療電子機器
- 心電計などの装着型医療電子機器

次のような方は絶対に使用しないでください。
事故、トラブルの恐れがあります。

- 心臓に疾患がある方
- 交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある方
- 急性疾患 / 有熱性疾患 / 感染症疾患 / 結核症疾患の方
- 悪性腫瘍のある方
- 顔面神経痛の方
- ケロイド体質の方・他皮膚に異常のある方
- その他体調のすぐれない方

ご使用方法

ご使用前に洗顔し、普段のスキンケアを行ったうえでお使いいただくとより効果的です。

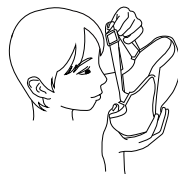


1. 全てのパーツを取り出し、本紙「■接続方法」に従って繋いでください。（マスクのみでもお使いいただけます）
2. ネックパーツと合わせて使う際は、マスクの下側とネックパーツの上部をはめ込んで固定します。
3. マスクの後ろのバンドを引き、目もとを保護パーツに押し付けるようにしてかぶります。
4. ご自身のサイズに合わせて、バンドの金具を調整してください。
5. コントローラーを操作して、お好みのケアをお楽しみください。

ご注意ください

バンドでの固定は行えますが、激しい動きには向いておりません。また、目もとの保護パーツについてはありますが、フリッカーモードにした際など眩しく感じる場合がございますので、ご使用の際はなるべくベッドやソファなどに横たわった状態での使用をお勧めいたします。
光が眩しく感じる際には、目を閉じてご使用ください。※LEDの光を長時間直接見続けるようなことはおやめください。

コントローラー使用方法

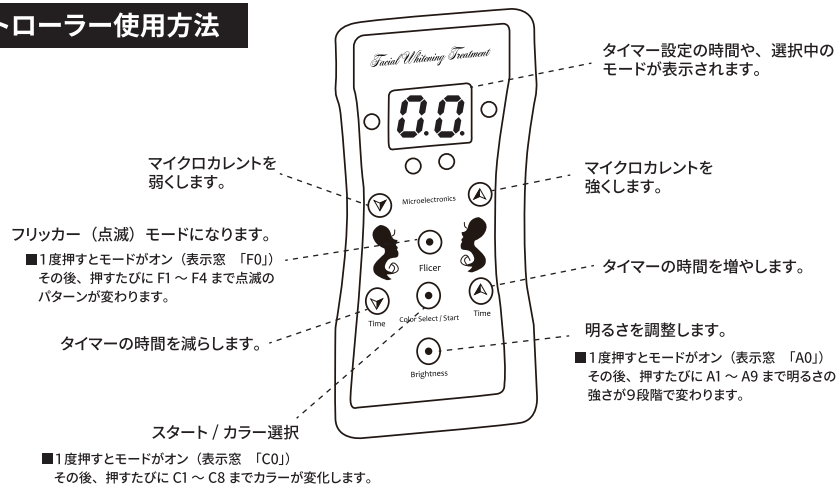

色の効能

- C1…赤：線維芽細胞の活性化を促し、お肌に欠かせないコラーゲン・コラーゲン繊維を支えるエラスチンの生成を促進します。
- C2…緑色：お肌の調子を整え、お肌に溜まった紫外線ダメージにアプローチ。皮膚を健やかに保ち、なめらかな若々しいお肌へ。
- C3…青：波長が短いためアクネ菌に対して効果が期待できます。ニキビによる肌荒れや吹き出物、ニキビ痕に悩む方へおすすめです。
- C4…黄色：お肌の調子を整え、お肌にたまりやすいダメージにアプローチ。シミ予防や美白ケア、肌にツヤを与えたい方に。
- C5…紫色：お肌に溜まった老廃物にアプローチ。お肌にハリ・ツヤを与え、健康的な素肌に。ワントーン明るい肌になりたい方に。
- C6…水色：赤ら顔・乾燥肌の原因でもある毛細血管に対してケアをし、お肌のきめを整えスキンケアの吸収をサポートします。
- C7…白色：LEDで一番肌深くまで光が届き、筋肉のもとになる細胞にアプローチ。年齢を重ねた肌ハリを与え、睡眠習慣の改善にも◎。
- C8…ALL：C1～C7のカラーを自動的に点灯させます。